


# アキュタッチ簡易取扱説明書

## I 開始手順


1. 本体電源のコンセントを入れ、シミュレータ本体へ  
アナトミープレートセットする

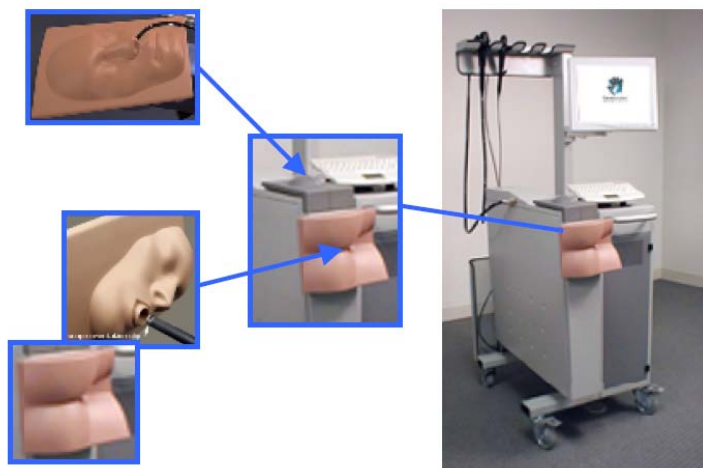

2. シミュレータ本体の前面扉を開け、  
PCの電源スイッチを押す



3. シミュレータ本体の背面電源がOFFになっていることを  
確認し、使用する内視鏡を接続、必要であればスネア  
も接続する

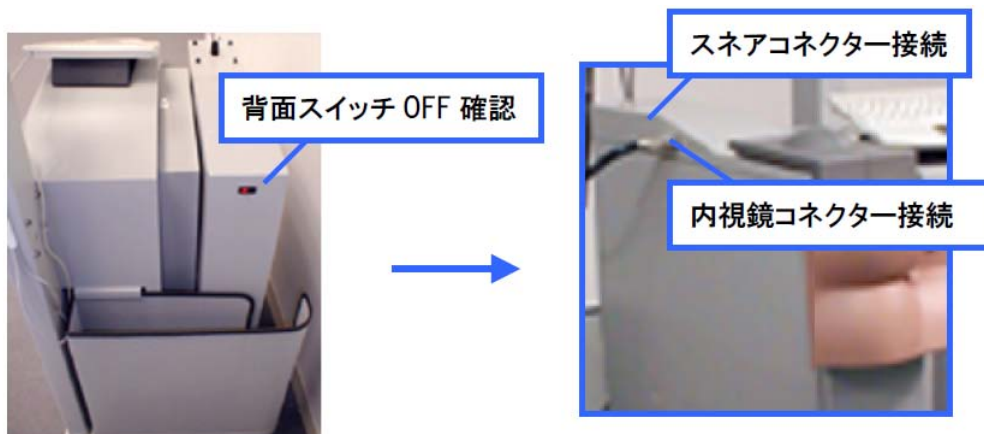

4. 画面上にWindowsデスクトップが表示されるので、EndoVRをクリックし、起動させる。

※従来のモジュールアイコンをクリックしても起動しますが、一回り小さい画面表示になります



5. 個人IDとPasswordをそれぞれ入力する

※ID/PW を忘れた場合、新規に取得を希望する方は医療教育統合開発センターへご連絡下さい

| MY CURRICULUM |         | DEMOS  | HELP | ADMINISTRATOR |
|---------------|---------|--|------|---------------|
| User          | EHolmes | Press the "Tab" key or touch the password box to move to the next field. |      |               |
| Password      | ***     | Press the "Ent" key or "LOG IN" when you are done.                       |      |               |

## 6. 'My CURRICULUM'タブをクリックするとシミュレーション可能なソフトウェア一覧が表示される



### 新規モジュール :

超音波気管支鏡ガイド下針生検  
(EBUS-TBNA)

上部消化管出血処置  
(GI Bleeding)

### 従来モジュール :

気管支内視鏡検査  
(Bronchoscopy Modules)

上部消化器内視鏡検査  
(Upper GI Modules)

下部消化器内視鏡検査  
(Lower GI Modules)

※EBUS-TBNAモジュール、UGIモジュールを使用する場合にはケースを選択し、画面右下の'START SIMULATION'をクリックするとソフトウェアのローディングが開始される(所要時間約1分)

※従来モジュールを使用する場合はID/PWの入力画面に移行後、再度個人ID/PWの入力が必要。メニュー、ケースを選択しながら'CONTINUE'をクリック、ソフトウェアのローディングが開始される(所要時間約10秒)



## Ⅱ 利用時の注意事項



ローディングが終了し、トレーニング画面へ移行するまでは、画面の指示に従ってシミュレータ本体へスコープを挿入しないで下さい。シミュレータ本体からスコープチューブが抜けなくなり破損につながります。



気管支内視鏡のスコープヘッドとチューブの接続部分を曲げないように注意してご利用下さい。生検トレーニングの処置具の利用に問題が生じる可能性があり、ワーストケースで接続部分が切断する恐れがあります。



### Ⅲ 終了手順

#### 1. モジュール別 終了方法

##### ●EBUS-TBNA, UGI（新規モジュール）

画面右下に表示された'END SIMULATION'をクリック


##### ●Broncho, Upper GI, Lower GI（従来モジュール）

画面右下に表示された'EXIT'をクリック

#### 以下共通

#### 2. EndoVRを終了させるため、右下に表示された'EXIT'をクリック

#### 3. その後、画面中央に表示されたWindowに表示される 'Reboot Windows'をクリック

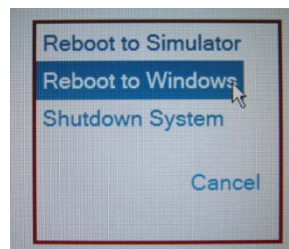


※ 違うメニューでシャットダウンしてしまうと、次に利用する際の立ち上がり画面が異なってくるため、必ず'Reboot Windows'を選択すること

#### 4. Windowsが再起動し、デスクトップの画面に戻る

#### 5. WindowsのデスクトップStartメニューからTurn Offを選択し、システムを終了させる

#### 6. 本体電源コンセントを抜く

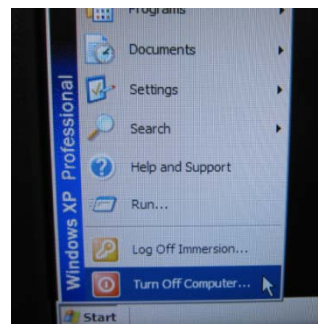

医療教育統合開発センター  
内線 6597